

# nova**TERM**

RADIOFRECUENCIA DIATERMIA

## NOVATERM

Técnica no invasiva de tratamientos de transferencia de corrientes de alta frecuencia al organismo por **CALENTAMIENTO Y FRICCIÓN.**



# Máquina



## ¿QUÉ ES?

- Un científico español, el Sr. "Josep Calbet", inventó la 'tecnología central para el tratamiento del cáncer' para pacientes con cáncer. Sus instrumentos aumentan la temperatura de las células cancerosas en la parte profunda del cuerpo entre 1 y 7 grados. Cuando las células cancerosas están alrededor de 35 grados, se desarrolla más rápido, pero cuando la temperatura de las células cancerosas alcanza los 39 grados o más, las células cancerosas no pueden replicarse y sus células morirán.
- Los científicos españoles creen que la tecnología central de este instrumento también se puede aplicar a la belleza. Elevar la temperatura corporal no es solo para la belleza, sino que puede aumentar la temperatura en las partes profundas del cuerpo cuando se opera el instrumento. La temperatura corporal tiene una relación muy estrecha con su salud. Cuando la temperatura corporal aumenta en 1 grado, la inmunidad de su cuerpo puede mejorarse de 5 a 10 veces.
- (Por ejemplo, les explicaré que cuando tenemos un resfriado, tendremos fiebre, y cuando tenemos fiebre, la temperatura en nuestro cuerpo aumentará. En este momento, nuestras propias células inmunes se activarán para atacar y resistir al virus. Se puede analizar el caso que la temperatura en nuestro cuerpo tiene una gran relación con nuestra propia inmunidad. relación)
- En la actualidad, hay muchos instrumentos de belleza similares en el mercado, pero es difícil penetrar en las partes profundas del cuerpo. El controlador de temperatura de 448k puede transmitir energía de manera segura a las partes profundas del cuerpo a través de la alta frecuencia de 448KHZ, mejorando la temperatura interna y la inmunidad del cuerpo.

## CAP Principio y eficacia


- **Principio CAP:** la tapa se basa en la temperatura normal constante de la epidermis y la tecnología central de calentamiento profundo por radiofrecuencia, para garantizar que la piel esté cómoda y no dañada, y luego use la tapa para generar conducción de energía térmica, alcanzar con precisión el capa profunda de la piel, y estimular los iones y las partículas coloides cargadas en el cuerpo para moverse rápidamente. O vibrar y frotar para generar energía térmica, y al mismo tiempo, bajo la acción de la tecnología de resonancia molecular polar, el tejido de colágeno del la dermis se calienta. Cuando la energía térmica del tejido de colágeno profundo de la piel alcance los 45 ° C-60 ° C, producirá una contracción inmediata de forma natural, estimulará la secreción de más colágeno nuevo para llenar los vacíos de colágeno atrofiado y perdido, y se reorganizará para reconstruir el El andamio suave de la piel El resultado final es reafirmar la piel, rellenar las arrugas, restaurar la elasticidad y la luminosidad de la piel.
- **Eficacia:** 1. Mejora el endurecimiento, blanquea y rejuvenece la piel; 2. Controla el acné, mejora las arrugas; 3. Quema grasa, alivia el dolor; 4. Mejora el estreñimiento y aumenta la elasticidad; 5. Aprieta la relajación posparto y alivia el dolor muscular; 6. Relaja la rigidez articulaciones 7. La introducción de esencia auxiliar.

## RET Principio y eficacia

- El instrumento de alta frecuencia R.E.T es un instrumento para bajar de peso que proyecta energía de alta frecuencia en el cuerpo humano, genera calor profundo desde la capa de corteza de mandarina de la piel y descompone la grasa corporal, logrando así el propósito de perder peso. Cuando la corriente de alta frecuencia se energiza en el tejido humano, la amplitud de la vibración es muy pequeña, por lo que casi no se produce ningún fenómeno de movimiento de iones y no se produce ningún fenómeno de reacción electroquímica o descomposición eléctrica. Si la alta frecuencia se transmite al cuerpo humano, el tejido humano se calentará. Esto se debe a que cuando se aplica una corriente de alta frecuencia al cuerpo humano, cada vez que la corriente cambia de dirección, las moléculas que componen el tejido vibrarán y se frotarán entre sí para realizar movimientos de rotación, torsión y conflicto. A esto se le llama calor. alta temperatura.
- Eficacia RET:
  - 1 Drenaje linfático
  - 2 Mejorar la circulación sanguínea
  - 3 Reparación de células, nervios, huesos, músculos, ligamentos
  - 4 Regular endocrino
  - 5 Mejora el sueño
  - 6 ilumina el tono de la piel
  - 7 Mejorar el problema de la flacidez e hiperplasia mamaria
  - 8 Problemas con la forma del cuerpo y piel de naranja en las piernas
  - 9 Bajar de peso
  - 10 Quemar grasa visceral

# 448K Interfaz

- 1 Regulación energética
- 2 teclas de energía más y menos
- 3 Modo RET/CAP
- 4 teclas de tiempo más y menos
- 5 Pausa
- 6 inicio

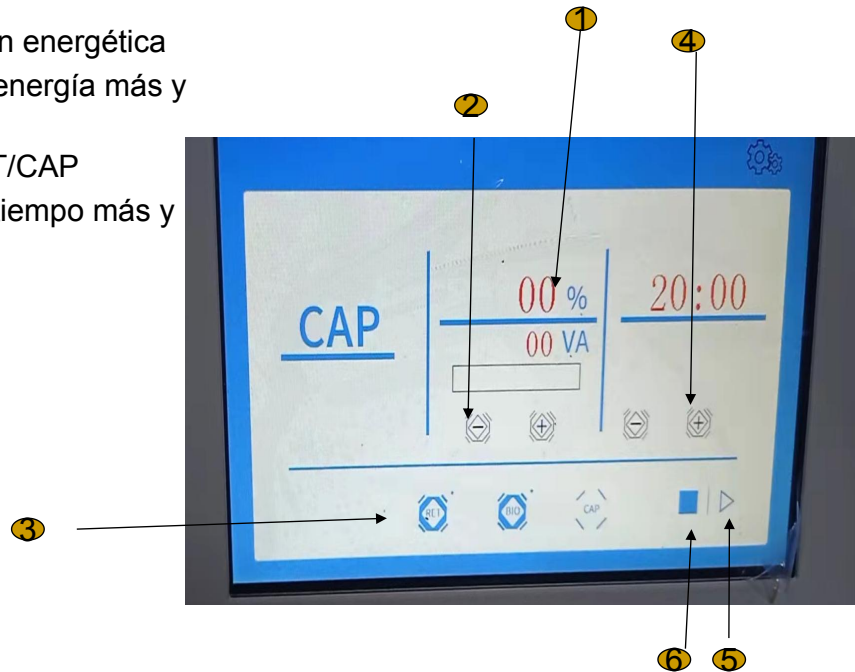


## 448K Procedimientos de operación

- Presione el botón de encendido para encender, haga clic en la interfaz de encendido para ingresar a la interfaz de operación
- Seleccione CAP, haga clic en el botón de inicio para comenzar a trabajar y luego presione las teclas más y menos para ajustar la energía para la operación adecuada. (0-100 ajustable)
- Seleccione RET y haga clic en el botón de inicio para comenzar a trabajar. Presione las teclas más y menos para ajustar la energía para la operación adecuada. (0-100 ajustable)

## 448K cabeza

- 448k RET y CAP modo

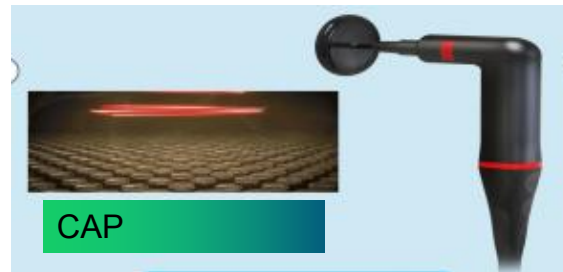



## 448K esquema técnico



### esquema tecnico



Se utilizan dos electrodos diferentes para promover la ionización del cuerpo de modo que los iones positivos y negativos de las células se rocen entre sí para generar calor interno.

# CAP MODO

- **【Instrumento de radiofrecuencia de 448k】 Efecto de cuidado facial**
- **【Instrumento de radiofrecuencia de 448k】 Las principales funciones de la cara son "mejora de la masa muscular" y "activación de las células". ¡Puede disfrutar de una amplia gama de efectos con un solo [instrumento RF de 448k]!**
- 1 cara pequeña
- 2 Antiedad - mejora de arrugas, manchas y flacidez
- 3 efecto de impulso
- 4 Activación de células faciales
- 5 Promover el metabolismo basal del rostro
- 6 Oscuridad --- piel transparente
- 7 Acné - sin protuberancias
- 8 Levantamiento de ojos
- 9 Mejorar el ritmo de regeneración celular de la piel
- 10 Quema de grasa facial: mejora la relajación facial, papada
- 11 Mejora la hinchazón facial
- 12 Mejora los puntos negros
- 13 Mejora el cuello, la rigidez del cuello
- 14 Calma los músculos de la expresión, expresión natural y enérgica
- todo el proceso de enfermería?
- Durante la lactancia, para aumentar la eficacia del [instrumento de radiofrecuencia 448k], se aplica una loción profesional en la cara. **【Instrumento de radiofrecuencia 448k】** La cara incluye el cuello y la parte superior del pecho. Hay muchos vasos linfáticos en el cuello, y la tez de la cara cambiará mucho si se extrae la linfa.
- Proyecto "Carita"
- **【Dispositivo de radiofrecuencia 448k】** Extrae el exceso de humedad en la piel y las capas profundas, tensando toda la piel. Al mismo tiempo, quema grasa de manera efectiva y los músculos de la barbilla y la manzana tienen una curva ideal. La relajación y la hinchazón alrededor de los ojos mejoran, los ojos se aprietan y hay un claro contraste después de hacerlo.
- Proyecto "Dragado linfático"
- **【Instrumento de radiofrecuencia de 448k】** El último eslabón para calentar toda la cara es el "dragado linfático". El exceso de agua en la cara, los desechos viejos y la grasa quemada se eliminan del cuerpo a través del sistema linfático. Si no haces esta parte del esfuerzo, todos los esfuerzos anteriores serán en vano, y finalmente se realizará el ajuste de la pequeña escultura de la cara. Pues la expresión después de la escultura es muy natural.



# RET MODO

- **"Modo RET"**
- En primer lugar, para lograr energía térmica en las partes profundas del cuerpo, el "modo RET" se utiliza para iniciar la temperatura de su cuerpo no es muy alta, el efecto después de que la temperatura del cuerpo no es alta, por lo que la parte profunda de su cuerpo se "calienta" primero. El efecto del calentamiento es mejorar la circulación sanguínea en el cuerpo, cada célula puede recibir una gran cantidad de "oxígeno", y el líquido linfático también circula rápidamente. Elevar la temperatura corporal es la condición física más básica. Aumento de la temperatura corporal, por supuesto, aumento del metabolismo. Las diferentes partes del tiempo de operación son diferentes, alrededor de 30 minutos para una parte.
- **Eficacia RET:**
  - 1 Drenaje linfático
  - 2 Mejorar la circulación sanguínea
  - 3 Reparación de células, nervios, huesos, músculos, ligamentos
  - 4 Regular endocrino
  - 5 Mejora el sueño
  - 6 ilumina el tono de la piel
  - 7 Mejorar la flacidez e hiperplasia mamaria
  - 8 Problemas con la forma del cuerpo y la celulitis en las piernas
  - 9 perder peso
  - 10 Quemar grasa visceral



## 448k Precauciones para el instrumento de radiofrecuencia

- **No lo use si tiene los siguientes síntomas. - Pacientes con enfermedades agudas, pacientes con trastornos hemorrágicos por encima de 38° C. - Hipertensión, enfermedades infecciosas, tuberculosis. - Pacientes con tumores malignos, pacientes con enfermedades del corazón, mujeres embarazadas. - Alérgicos, hemofílicos. - Uso prolongado de hormonas esteroides y disfunción hepática por telangiectasias. - Pacientes de explosión atómica, pacientes con enfermedades infecciosas confirmadas. - Pacientes con melanososis en la cara, los que llevan mucho tiempo visitando el hospital y los que tienen fiebre. - Los que toman medicamentos, niños menores de 12 años.**
- **- Hay un stent de metal en el cuerpo, no lo use.**



nova**TERM**

nacnova  
APARATOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA 

Descubre más en:

**T: 661 810 908**

[www.nacnova.com](http://www.nacnova.com)

 [facebook.com/nacnova](https://facebook.com/nacnova)

 [\\_nacnova](https://instagram.com/_nacnova)